



“La nueva técnica de presión controlada, respetuosa con el adipocito y menos traumática en tejido graso que favorece una mayor viabilidad de las células infiltradas.”

Workstation Pro plus

**La solución más eficiente “todo en uno”
para lipotransferencia alta definición asistida.**



Surgest
MEDICAL



MÖLLER

Vibrasat® Pro **Power-Assisted Liposuction**

Para un liposucción sin fatiga, trabaje con una de las tecnologías más respetuosas con tejido graso y adipocitos.

Vibrasat® Pro es líder en tecnología para liposucción asistida por vibración. Su sencillo manejo reduce la fatiga del cirujano incluso en los procedimientos más largos, mientras que su tecnología maximiza resultados y reduce el traumatismo.

- Permite en un mismo aplicador, la perfusión, la extracción y la infiltración de grasa con solo cambiar la cánula. Sistema QuickLock con un solo botón.
- El menor esfuerzo requerido para introducir la cánula a través del tejido permite un traumatismo menor y una mayor precisión.
- Función boost para incrementar hasta 6.000 ciclos/min.
- Sistema de equilibrado contra vibración para mejor sensación en la mano.
- Medical device clase IIa.



Vacusat® Power **El referente en potencia para lipoaspiración**


Potente en la succión, silencioso en quirófano.

Vacusat® power es una máquina extremadamente potente, fiable y fácil de operar. Gracias a su innovadora tecnología de insonorización, es también uno de los mejores y más silenciosos de su categoría.

Ocupa un espacio reducido, aunque su sistema modular, permite la incorporación del resto de equipos que configuran la Workstation.

Un sistema de succión potente permite periodos de uso prolongados hasta 90 kPa nn (0,9 atm), con altos volúmenes de succión (hasta 58 l/min) para intervenciones más rápidas.

- Medical device clase IIa.

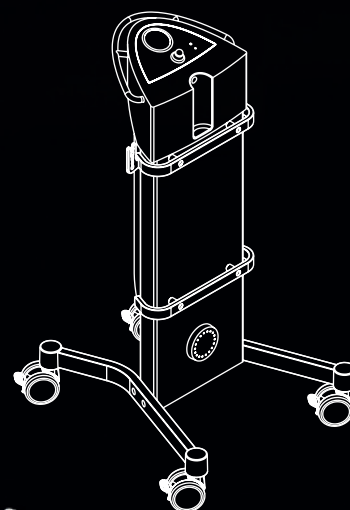

Liposat® Pro plus **Una solución premium para una infiltración fácil y segura de grasa/TLA**

Cuando hablamos de lipoinfiltración, la predictibilidad en el resultado está muy relacionada con la viabilidad de las células grasas infiltradas. Gracias a su rotor con tecnología "minimal shear forcé", transfiere la grasa recolectada de forma precisa y suave para preservar la estructura de los adipocitos.

Liposat® Pro plus permite visualizar y gestionar el volumen seleccionado, así puede enfocarse solo en su paciente. Es un equipo certificado FDA y CE para infiltración de grasa y TLA. Velocidad de infiltración de 50 a 1.000 ml/min.

- Medical device clase IIa (quirúrgico).



Thermia Pro **La solución anti-Hipotermia**

**Mantiene a una temperatura constante
la solución TLA pre-calentada.**



La hipotermia es un riesgo real para pacientes bajo procedimientos de gran volumen, donde gran cantidad de fluidos serán infiltrados en el cuerpo sin calentamiento previo.

Para reducir estos riesgos, MÖLLER le ofrece Thermia Pro.

Su especial diseño permite mantener la temperatura del suero a la temperatura corporal, incluso en procedimientos largos.

Esto le permite ofrecer a sus pacientes un mayor nivel de seguridad y confort.

- Medical device clase IIa.



Workstation Pro plus

La tecnología definitiva para lipotransferencia alta definición

Vacusat®Power

Protección contra
desbordamiento y filtro
hidrofóbico


Thermia Pro
Consola

Vibrasat®Pro

Liposat®Pro or
Liposat® Pro plus

Thermia Pro
Bandejas de
calentamiento

VÍDEOS PROCEDIMIENTO

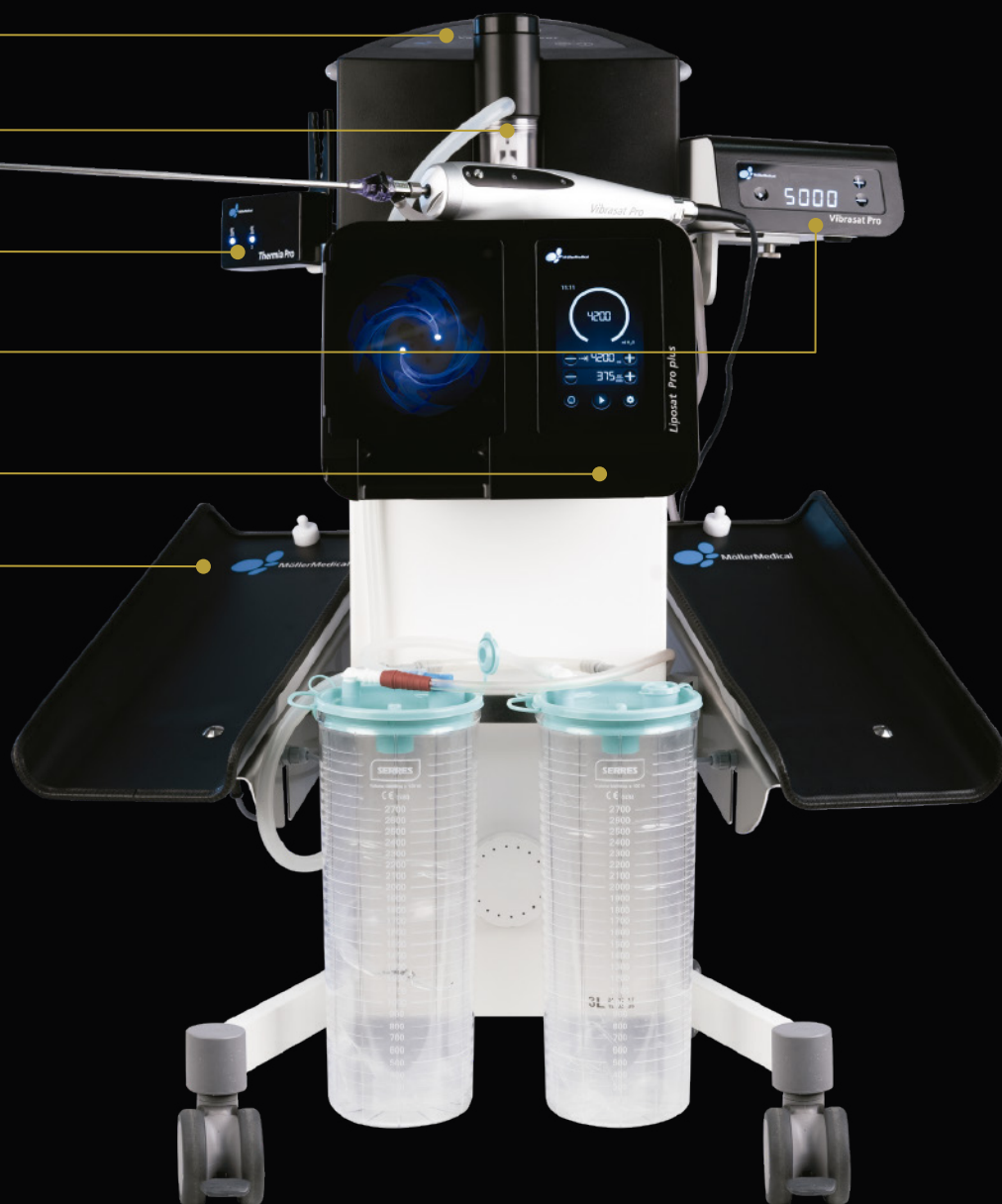

FAT IS GOLDEN

Surgest
MEDICAL



Tel. 935 895 350
surgest@surgest.com

www.surgest.com



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR